


# QUICK USER GUIDE

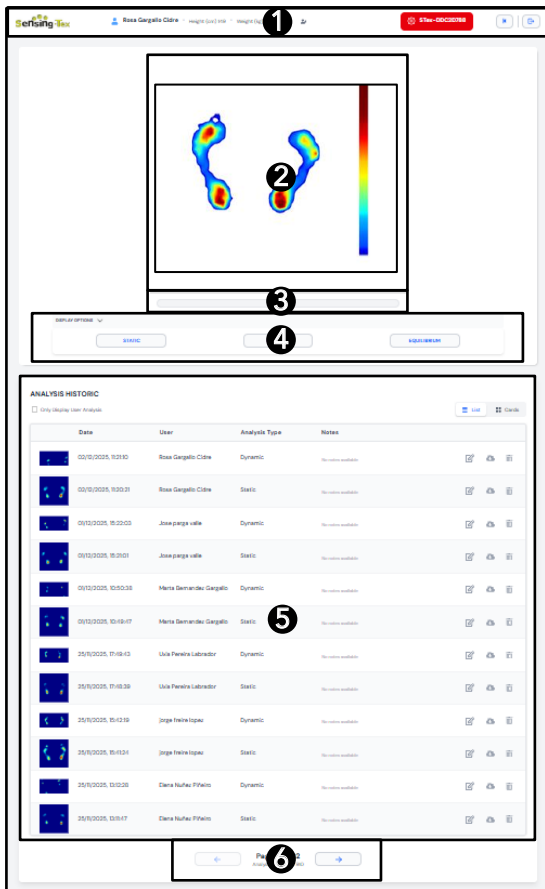

## 1. PATIENT AND CLINIC DATA CONFIGURATION

- **Left:** Patient Management. You can edit a patient's profile or create a new one.
- **Right:** A colored button shows platform status (Red/Inactive, Green/Active). Click to edit company name, address and logo.

## 2. VISUALIZATION OF PRESSURE DATA

This screen displays real-time pressure mapping data.

## 3. LOAD BAR

The progress bar shows the analysis progress. When the bar is full, the analysis is completed.

## 4. ANALYSES

Select the analysis type, then click the button to begin.

## 5. ANALYSES HISTORY

Once the analyses are completed, they will be saved in this section. You can consult them whenever you need to. You can also download them and add comments.

## 6. MANAGE SAVED ANALYSES

This section displays the results of 12 analyses. You can switch pages using the buttons to view previous analyses.


## A. STATIC ANALISYS

- Position the patient on the platform with their feet centered.
- Click the button to begin the analysis. Read the Tutorial and Click Ready.
- Wait for the loading bar to reach 100%.



## B. DYNAMIC ANALISYS

- Position the patient one meter and a half away on the left side of the platform.
- Click the button to begin the analysis. Read the tutorial and Click Ready. (you will have **20 seconds** to step two times left and right following this sequence):
  - The patient walks toward the platform, placing their left foot on it (they must take two steps before reaching the platform).
  - The patient turns 180 degrees.
  - The patient walks toward the platform, placing their right foot on it (they must take two steps before reaching the platform).

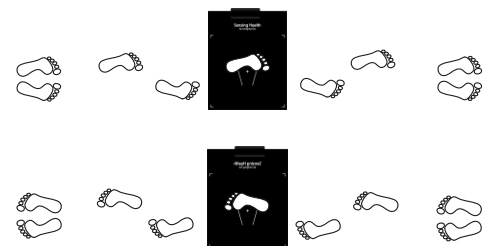


## C. EQUILIBRIUM ANALISYS

- Position the patient on the platform with their feet centered.
- Click the button to begin the analysis.
- The analysis duration is **20 seconds**, but the data is collected on the first **10 seconds**.
- Wait for the loading bar to reach 100%.



For detailed information on the functionality of the members' area, please refer to the User Manual provided by your distributor. The platform is not recommended for use by children.

# GUÍA RÁPIDA DE USO

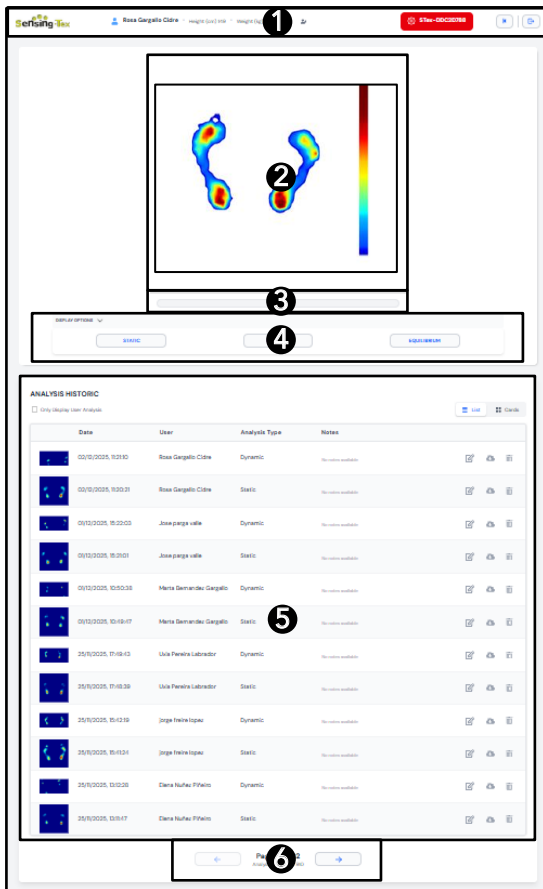

## 1. CONFIGURACIÓN DE DATOS DEL PACIENTE Y DE LA CLÍNICA

- Izquierda:** Gestión de pacientes. Puede editar el perfil de un paciente o crear uno.
- Derecha:** El botón de color muestra el estado de la plataforma (Rojo/Inactivo, Verde/Activo). Permite editar el nombre, la dirección y el logotipo de la empresa.

## 2. VISUALIZACIÓN DE DATOS DE PRESIÓN

Esta pantalla muestra datos de mapeo de presión en tiempo.

## 3. BARRA DE PROGRESO

La barra de progreso muestra el progreso del análisis. Cuando la barra esté llena, el análisis estará completado.

## 4. ANÁLISIS

Seleccione el tipo de análisis y luego haga clic en el botón para comenzar.

## 5. HISTORIAL Y GESTIÓN DE LOS ANÁLISIS

Una vez finalizados los análisis, se guardarán en esta sección. Podrá consultarlos siempre que lo necesite. También podrá descargarlos y añadir comentarios.

## 6. VER ANÁLISIS ANTERIORES

Esta sección muestra los resultados de 12 análisis. Puede cambiar de página usando los botones para ver análisis anteriores.


### A. ANÁLISIS ESTÁTICO

- Coloque al paciente en la plataforma con los pies centrados.
- Haga clic en el botón para comenzar el análisis. Lea el tutorial y haga clic en Listo.
- Espere a que la barra de carga alcance el 100 %.



### B. ANÁLISIS DINÁMICO

- Coloque al paciente a un metro y medio de distancia, a la izquierda de la plataforma.
- Haga clic en el botón para comenzar el análisis. Lea el tutorial y haga clic en Listo. (Dispondrá de **20 segundos** para dar dos pasos a la izquierda y a la derecha siguiendo esta secuencia):
  - El paciente camina hacia la plataforma, apoyando el pie izquierdo (debe dar dos pasos antes de llegar a la plataforma).
  - El paciente gira 180 grados.
  - El paciente camina hacia la plataforma, apoyando el pie derecho (debe dar dos pasos antes de llegar a la plataforma).

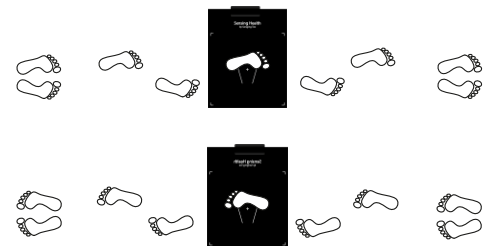

### C. ANÁLISIS DE EQUILIBRIO

- Coloque al paciente en la plataforma con los pies centrados.
- Haga clic en el botón para iniciar el análisis.
- La duración del análisis es de **20 segundos**, pero los datos se recogerán de los primeros **10 segundos**.
- Espere a que la barra de carga alcance el 100 %.



Para obtener información detallada sobre la funcionalidad del área de miembros, consulte el Manual de usuario proporcionado por su distribuidor.